

Caudalímetros Ultra-Flo II



Utilização clínica

Ultra-Flo II é um regulador de caudal de rotâmetro de bola para uso Hospitalar em unidades terminais de Oxigénio e/ou Ar.

Simplicidade de utilização e grande fiabilidade, permitindo o fornecimento de gás diretamente para o paciente de forma doseada ou através de um humidificador incorporado na saída DISS.

Inovação e design ergonómico

Escala de fácil leitura, alta precisão e rotação de 360° a qualquer momento para uma melhor leitura e adaptação do usuário.

Disponibilidade de duas saídas (humidificador e espiga), facilmente selecionadas pelo botão seletor de duas posições.

Variedade de modelos

- Simples ou duplo.
- Ligação direta com conetores seletivos ou através de uma calha.
- Saída de humidificador.
- Saída de humidificador e espiga com seletor integrado.




Qualidade e segurança

Projetado segundo a norma UNE-EN ISO 15002 e certificado como Dispositivo Médico Classe IIa de acordo com a diretiva 93/42/CEE.

Caraterísticas técnicas

Integração do seletor completo com saídas em espiga e humidificador, o que torna este modelo um dispositivo compacto e reduzido.

Carapuça exterior e rotâmetro interior orientáveis 360°, para facilitar a leitura e adaptação em cada momento à necessidade do usuário.

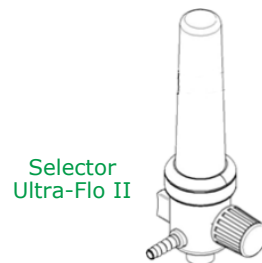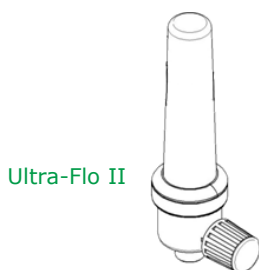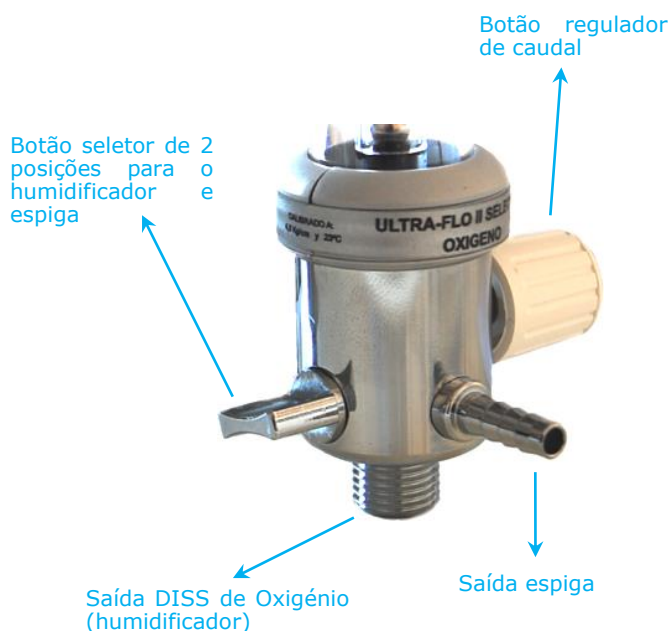

Material do corpo	Latão cromado	Latão cromado
Material da carapuça e rotâmetro	Polycarbonato	Polycarbonato
Material da bola	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Material do filtro de entrada	Bronze sinterizado	Bonze sinterizado
Dimensões	Ø31x148 mm	Ø31x157 mm
Peso (sem conetor)	225 g.	290 g.
Pressão de entrada	4,5 bar	4,5 bar
Precisão	±10%	±10%
Calibração	101.3 kPa e 23°C	101.3 kPa e 23°C
Saídas	DISS O2 UNF 9/16"	DISS O2 UNF 9/16" e espiga
Gás	Oxigénio e gás medicinal	Oxigénio e gás medicinal
Débito	15 l/min	15 l/min

Modelos de caudalímetro de conexão direta

Conetor seletivo incorporado para conexão à unidade terminal.



Simple





Duplo

Lista de códigos de modelos com conexão direta

Tipo de conetor	Ultra-Flo II de Oxigênio		Seletor Ultra-Flo II de Oxigênio		Ultra-Flo II de Ar Medicinal	
	Simple	Duplo	Simple	Duplo	Simple	Duplo
CM	75423	75427	75438	75442	75462	75466
MM	75420	75424	75435	75439	75459	75463
NF	75421	75425	75436	75440	75460	75464
FRO	129768	129769	160278	160284	129770	129771
AGA	160215	160219	160280	160286		
DIN	75422	75426	75437	75441	75461	75465
BS	154822	160220	160281	160287	154823	160321
BOC SACCAB	160216	160221	160282	160288		
NASSETTI	120182	120179	120180	160290		

Modelos de caudalímetro com conexão em calha

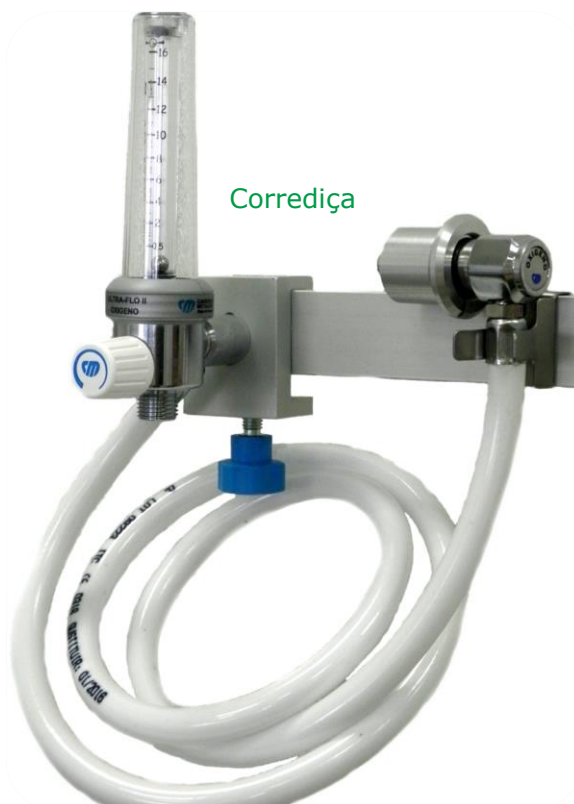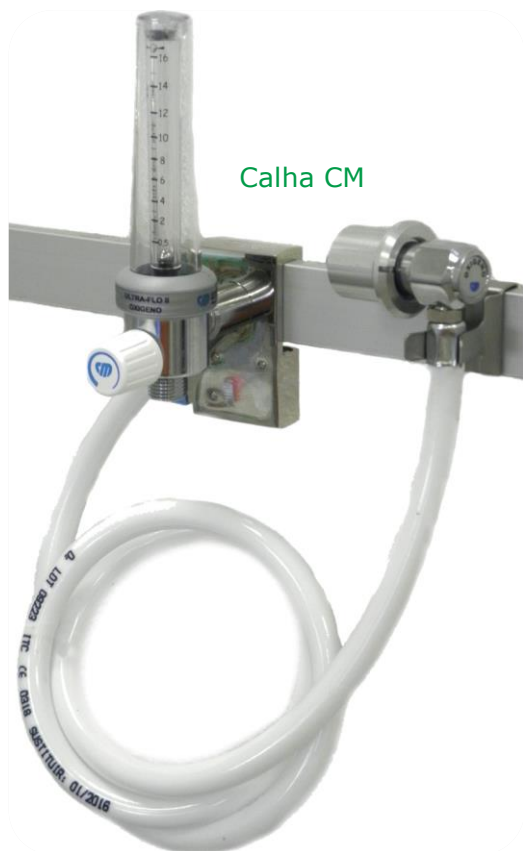

Tubo atóxico flexível com reforço em fibra de poliéster com 1,5 metros de comprimento, secção ext./int. Ø12mm/ Ø6mm e pressão de trabalho de 12 Kg/cm².

Lista de códigos de modelos com conexão em calha e corrediça

Tipo de conexão	Ultra-Flo II de Oxigénio		Seletor Ultra-Flo II de Oxigénio		Ultra-Flo II de Ar Medicinal	
	Simples	Duplo	Simples	Duplo	Simples	Duplo
Calha CM & CM	75431	160242	75455	160310	75470	
Corrediça & CM	75434	160251	75458	160319	75473	
Calha CM & MM	160223	160235	160292	160303		
Corrediça & MM	160229	160244	120181	160312		
Calha CM & NF	75429	160236	75453	160304	75468	160324
Corrediça & NF	75432	160245	75456	160313	75471	160326
Calha CM & FRO	160224	160237	160293	160305		
Corrediça & FRO	160230	160246	160298	160314		
Calha CM & AGA	160225	160238	160294	160306		
Corrediça & AGA	160231	160247	160299	160315		
Calha CM & DIN	75430	160239	75454	160307	75469	
Corrediça & DIN	75433	160248	75457	160316	75472	
Calha CM & BS	160226	160240	160295	160308	160322	160325
Corrediça & BS	160232	160249	160300	160317	160323	160327
Calha CM & BOC SACCAB	160227	160241	160296	160309		
Corrediça & BOC SACCAB	160233	160250	160301	160318		
Calha CM & NASSETTI	160228	160243	160297	160311		
Corrediça & NASSETTI	160234	160252	160302	160320		

Acessórios / Peças sobressalentes Ultra-Flo II



Código 75475
Seletores Flo II



Código 437758
Frasco humidificador
descartável




Código 437757
Conector DISS de
oxigênio
Bolsa de 30 unidades

Código 478793
Conjunto escala O2 0-15 l/min
Código 478794
Conjunto escala O2 0-15 l/min seletor
Código 478795
Conjunto escala Ar 0-15 l/min
Ultra-Flo II




Item	Descrição
1	Limitador superior
2	Escala 0-15l/min
3	Bola de aço
4	Limitador inferior
5	Carapuça
6	Semibrida (2uds)
7	Anilha de fecho
8	Junta tórica Ø20xØ2mm
9	Junta tórica Ø5x1,5mm
10	Adesivo Ultra-Flo II - O2
11	Adesivo Ultra-Flo II -seletor O2
12	Adesivo Ultra-Flo II - Ar

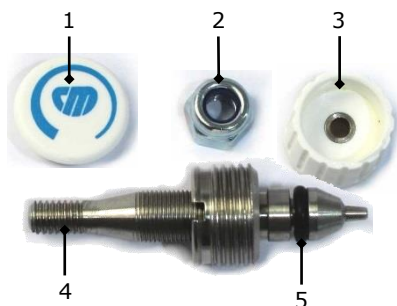

Código 478796
Conjunto de botões de regulação
Ultra-Flo II

Item	Descrição
1	Tampa de botão CM
2	Porca de fecho
3	Corpo do botão
4	Válvula de punção
5	Junta tórica Ø3xØ1,5mm

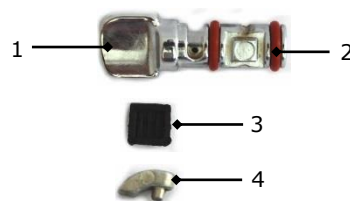

Código 478797
Conjunto de seletor
Ultra-Flo II

Item	Descrição
1	Eixo seletor
2	Junta tórica Ø8xØ1,5mm (2 uds)
3	Amortecedor
4	Espeto

Importante: Não se fornecem os componentes separados de cada conjunto

www.gasin.com
tell me more



GASIN – Gases Industriais Unipessoal, Lda
Grupo Air Products
Rua do Progresso, 53 Perafita
4451-801 Leça da Palmeira
NIF. 510 183 751
Tlf. 229 998 353
info@gasin.com
www.gasinmedica.com